

Omyra® Mesh


Jednowarstwowa, transparentna, nieadhezyjna siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną do implantacji wewnątrztrzewnowej

Opis

Omyra® Mesh to unikalna siatka chirurgiczna w grupie siatek nieadhezyjnych, pierwsza jednowarstwowa i niepowlekana, posiadająca właściwości antyadhezyjne i minimalizujące ryzyko powstawania infekcji. Omyra® Mesh wykonana została w nowej technologii z skondensowanego o niskiej gramaturze politetrafluoroetylen (cPTFE), co redukuje powstawanie zrostów i zapewnia łatwy przerost tkanek, porównywalny do osiągalnego w przypadku siatek polipropylenowych. Technologia nowej generacji cPTFE zapewnia właściwości zagęszczonego PTFE, który tworzy gładką, jednolitą i mocną warstwę materiału, zapobiegającą powstawaniu zrostów, w porównaniu z materiałem ePTFE. Struktura makroporowata siatki (2,4 mm) o gwieździstym kształcie pozwala na drenaż płynu surowiczego, redukując zapalenia i dolegliwości bólowe pacjenta, jednocześnie zapewniając optymalny przerost tkanek. Transparentność i jednowarstwowość Omyra® Mesh, zapewniają doskonałe właściwości poręczności, szczególnie istotne w przypadku procedur laparoskopowych.

Wskazania:

- IPOM (chirurgia klasyczna i laparoscopia)- przepukliny brzuszne, pooperacyjne, pępkowe i przepukliny pachwinowe
- Przepukliny pachwinowe, w przypadku nietolerancji przez organizm polipropylenu
- Ubytki powięzi, zespół przedziałów powięziowych

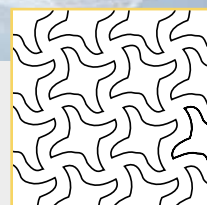

- Rekonstrukcja powłok jamy brzusznej
- Rekonstrukcja klatki piersiowej


Właściwości:

- Doskonała biokompatybilność
- Struktura makroporowata- optymalny przerost tkanki
- Szybki przerost otrzewnej z siatką- neo- perytonizacja
- Redukcja powstawania zrostów
- Minimalizacja ryzyka powstania infekcji i wzrostu bakterii
- Technologia nowej generacji cPTFE
- Transparentność i jednowarstwowość- bezpieczeństwo i dokładność implantacji

Omyra® Mesh

Charakterystyka produktu:

Skład chemiczny	Skondensowany politetrafluoroetylen (cPTFE)
Struktura	Jednowarstwowa makroporowata
Kolor	Biały/ Transparentny
Absorpcja	Niewchłaniałna
Gęstość	0.9 g/cm ³
Grubość	0,15 mm
Wielkość porów	2.4 mm (kształt gwieździsty)
Sterylizacja	Tlenek etylenu

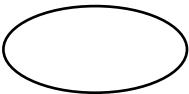Rozmiar	Ilość/ Opakowanie	Nr katalogowy	Kształt
6 x 11 cm	1 sztuka	1060611	
7.5 x 15 cm	1 sztuka	1060715	
10 x 15 cm	1 sztuka	1061015	
15 x 15 cm	1 sztuka	1061515	
14 x 14 cm	1 sztuka	1061414	
11 x 15 cm	1 sztuka	1061115	
15 x 22 cm	1 sztuka	1061522	
20 x 30 cm	1 sztuka	1062030	
26 x 36 cm	1 sztuka	1062636	