

MonoMax[®]

Szwy wchłaniające

Opis

MonoMax[®] jest syntetycznym, wchłaniającym szwem monofilamentowym z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego niepowlekanym, dostępnym w kolorze fioletowym. Ze względu na unikalny profil degradacji oraz ekstremalny profil absorpcji szew MonoMax[®] to najlepszy wybór dla procedury zespolenia jamy brzusznej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas krytycznej fazy gojenia się jamy brzusznej, utrzymując aż 50% pierwotnej zdolności podtrzymywania tkanki po 90 dniach.

Właściwości:

Zdolność podtrzymywania tkankowego:

100% - po 14 dniach

70% - po 42 dniach

50% - po 90 dniach

25% - po 140 dniach

Całkowita absorpcja masy szwu - 13 miesięcy

Zastosowanie:

Złoty standard dla procedury zespolenia jamy brzusznej w takich specjalnościach jak:

- Chirurgia ogólna i onkologiczna
- Ginekologia
- Urologia
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia przepuklin- fiksacja siatek przepuklinowych



ZŁOTY STANDARD DLA PROCEDURY ZESPOLENIA JAMY BRZUSZNEJ

Cechy produktu:









- Nadzwyczajna poręczność i zdolność podtrzymywania tkanki
- Idealna adaptacja do brzegów rany
- Elastyczność, giętkość
- Elastyczność wzdłużna aż do 90%
- Wysoka początkowa odporność węzła na rozciąganie
- Maksymalna adaptacja rany do nagłych lub stałych wewnątrzbrzusznych napięć i odruchów warunkowych
- Optymalny profil degradacji








MonoMax[®]

Charakterystyka produktu:









Struktura	Monofilament
Kolor	Fioletowy
Skład chemiczny	Poli-4- hydroksybutyrat (Poli-4-hydroksymaślan)
Powleczenie	Niepowlekany
Rodzaj materiału	Syntetyczny
Rozmiary	USP 2/0 do USP 1
Zdolność podtrzymywania tkankowego	50%- 90 dni po zaimplantowaniu
Absorpcja	13 miesięcy (proces hydrolizy)
Steryliczacja	Tlenek etylenu

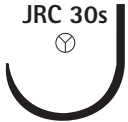

MonoMax[®]

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
1/2 koła igła okrągła										
 HR 26	70 150 fioletowy					B0041249 B0041444				
 HR 26s	150 fioletowy						B0041442			
 HR 30	150 fioletowy					B0041453				
 HR37	70 90 fioletowy					B0041015	B0041024	B0041025		
 HR37s	70 90 150 fioletowy					B0041034	B0041035 B0041046 B0041043	B0041036 B0041047		
 HR40	70 90 fioletowy					B0041057	B0041066	B0041067		
 HR40s	70 90 fioletowy					B0041086	B0041087 B0041097	B0041088 B0041098		
 HR40s	150 fioletowy						B0041076	B0041077		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
1/2 koła igła okrągła									
 HR43s	90 fioletowy					B0041107	B0041108		
 HR48	70 90 fioletowy				B0041128	B0041137	B0041138		
 HR48 pętla	150 200 fioletowy				B0041117	B0041118	B0041119 B0041325		
 HR65 pętla	150 fioletowy					B0041147	B0041148		
 HR76 pętla	150 fioletowy						B0041157		
5/8 koła igła okrągła									
 FR 26	70 fioletowy				B0041887				
 FR 40 pętla	70 fioletowy						B0041571		

MonoMax[®]

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
igła okrągła haczykowata typu „J” o zakończeniu krótkim tnącym									
 JRC 30s	70 fioletowy							B0041560	
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 HRT 26	70 fioletowy				B0041175	B0041176			
 HRT 40s	90 fioletowy						B0041194		
 HRT 40s pętla	150 fioletowy					B0041184	B0041185		
 HRT 43s	90 fioletowy						B0041212		
 HRT 43s pętla	150 fioletowy						B0041203		
 HRT 48	90 fioletowy					B0041240	B0041241		
 HRT 48 pętla	150 180 200 fioletowy					B0041221 B0041433	B0041222 B0041434 B0041231		

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
5/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym									
 FRT 65 <small>petla</small>	150 fioletowy					B0041005	B0041006		
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu tęnym									
 HRN 50 <small>petla</small>	150 fioletowy						B0041166		